

超軽量・コンパクト

× モジュール

カルッタ Carutta

Wheel Chair Miki

CRTシリーズのモジュールタイプ。 工具1本でシート幅の調整が簡単にできます。

様々なお身体の状態にあわせて、快適にお使いいただけるよう「シート幅の調整ができる」車いす。
もちろん、居宅や通路などの狭小エリアでも、取り回しの良い「超軽量・コンパクト」ボディです。




シートカラー：ブルー



シートカラー：レッド

品番 **CRT-1-CZ** TAIS: 00122-000609 **¥135,000** (非課税価格)
自走型 重量: 11.1kg ※1 前座高: 400mm (低座面) ※
●商品コード / CJ00983 ※クッション込430mm


●駆動輪22インチ軽量ハイポリマータイヤ、専用クッション標準装備

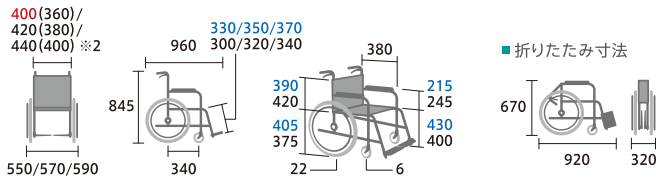

*スペックの赤文字は出荷時の寸法です。*出荷時の変更指定はできません。
*スペックの青文字はクッション込の寸法です。

品番 **CRT-2-CZ** TAIS: 00122-000610 **¥135,000** (非課税価格)
介助型 重量: 9.9kg ※1 前座高: 400mm (低座面) ※
●商品コード / CJ00984 ※クッション込430mm

●主輪14インチハイポリマータイヤ、専用クッション標準装備

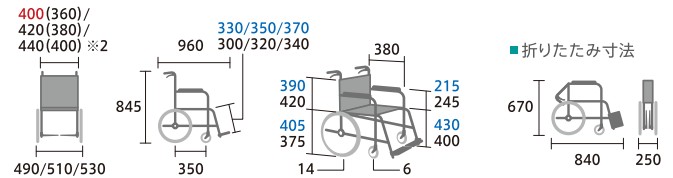

*スペックの赤文字は出荷時の寸法です。*出荷時の変更指定はできません。
*スペックの青文字はクッション込の寸法です。



シート幅モジュール (特許出願済)

身体状況や使用環境の変化に応じて、シート幅調整が従来より分かりやすく、より簡単に調整できます。



バックインナーサポート・座インナーシート

シーティングの心地よさを追求し生み出された調整式シート。各座幅に応じた目印により、簡単に調整ができます。



軽量ハイポリマータイヤ(黒)

従来より軽量なメンテナンスフリーのノーパンクタイヤ。パンクや空気漏れの心配がないので、とても便利です。



SKブレーキ

軽量でサビることなく耐久性に優れたブレーキ。



※ミキの車いすは折りたたため、収納や持ち運び、車への積み込みにも適しています。(イメージはCRT-1-CZ)

■カテゴリ&機能マーク



■シートカラー



耐荷重100kg

品番・シートカラー・商品コードを発注時にご指示ください。

※1 座クッションを除いた重量
※2 シート幅はアームパイプ内々の幅です。()内はエクスパイプ外々の幅です。

超軽量・コンパクト

× ノンバックブレーキシステム

カルッタ Carutta

CRTシリーズにノンバックブレーキシステムを搭載。 “ブレーキのかけ忘れ”による転倒を未然に防ぎます。



シートカラー：レッド




シートカラー：紺

品番 **CRT-1LoB** TAIS:00122-000611 **¥135,000** (非課税価格)

自走型 重量:12.3kg 前座高:375mm(低座面)※

●商品コード / CJ00981 ※クッション込415mm

●ノンバックブレーキシステム、駆動輪20インチ軽量エアタイヤ、専用クッション標準装備

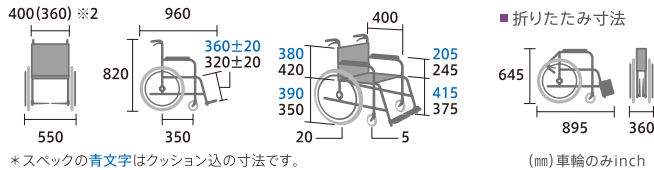


品番 **CRT-3LoB** TAIS:00122-000612 **¥155,000** (非課税価格)

自走型 重量:13.4kg 前座高:375mm(低座面)※

●商品コード / CJ00982 ※クッション込415mm

●ノンバックブレーキシステム、駆動輪20インチ軽量エアタイヤ、専用クッション標準装備

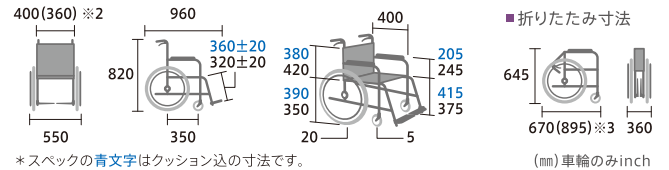

ノンバックブレーキシステムが 転倒事故を防止・軽減します。

車いすから立ちあがると同時にブレーキがかかるので、駐車ブレーキのかけ忘れによる転倒事故を防止・軽減します。

着座すると座面裏のローラーが押されて、車いす下部のブレーキユニットが解除。退座すると座面裏のローラーが元の位置に戻り、ブレーキが作動。



立ちあがるとブレーキが作動



座面裏のローラー(着座状態)



下部のブレーキユニット




※ミキの車いすは折りたためて、収納や持ち運び、車への積み込みにも適しています。(イメージはCRT-1LoB)

■カテゴリー&機能マーク



耐荷重100kg

■シートカラー

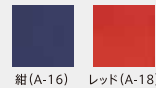

※2 シート幅はアームパイプ内々の幅です。()内はエクスパイプ外々の幅です。
※3 ()内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。

品番・シートカラー・商品コードを発注時にご指示ください。 適応体重は30kg以上です。

※ノンバックブレーキシステムは、万が一駐車用ブレーキをかけたままに立ち上がり、車いすの後ろ移動を抑える補助機能です。 ※車いすに乗り降りする際は、駐車用ブレーキを必ずかけましょう。

※掲載の価格は非課税価格です。 18.10

株式会社 ミキ



会社や商品についての情報のご確認は、MIKIホームページまで
<http://www.kurumaisu-miki.co.jp/>

商品に関するお問い合わせは 株式会社 ミキ お客様サポート窓口まで
TEL 0570-00-3993 FAX 0568-66-6335

※愛知県への通話料が発生します。

〒484-0928 愛知県犬山市宇七ツ屋51-3

お問い合わせ

仕様および価格は、製品の改良のため予告なく変更される場合があります。印刷の都合上、実物と色が異なる場合があります。■当社製造商品は生産物賠償責任保険に加入しております。