

CRT-SG-WR



ティルト&リクライニング車いす ■ シーアールティー エスジー ダブリュウアール

便利で機能的な装備が備わった、女性や力の弱い方でも扱いやすい 軽量でコンパクトなティルト&リクライニング車いすです。 姿勢保持と体圧分散に優れ、安全で快適な時間を車いすで過ごすことができます。



ティルト機能



おしり、太ももにかかる体重を背中 や腰に分散させることができます。 前ずれ防止にもなります。

リクライニング機能



ゆったりとくつろぎたい時や姿勢の 変換が必要な時に、背もたれの角度 を変えることができます。

ティルト・リクライニング機能



背もたれと座位の角度調節の組み 合わせにより、より良い座位姿勢を 長時間保つことができます。



補装具 レディメイド式


■ CRT-SG-WR TAIS: 00122-000703 ¥227,000(非課稅価格)

介助型 重量:18.2kg ※1

前座高:435mm(470mm %2)

● 商品コード / CJ01166

● ティルト角度 2~30°、リクライニング角度 95~130°、主輪14インチハイポリマータイヤ、 エアールクッション、スライド延長ブレーキ、反射板付き樹脂ホイール、立体マクラ、 転倒防止バー、足踏み駐車ブレーキ標準装備

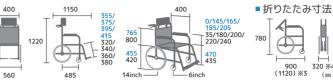

*スペックの青文字はクッション込の寸法です。

■ カテゴリー&機能マーク



















320 %4

耐荷重100kg

■シートカラ-





※ミキの車いすは コンパクトに折りたためます。

品番·商品コードを発注時にご指示ください。

※1 クッションを含んだ重量です。 ※2 クッション込の寸法です。 ※3 ()内はフット・レッグサポート を取り付けたままの寸法です。 ※4 折りたたみ寸法の全幅については、ワンタッチソフトシート・クッション (背・座)を外した時の寸法です。

※ハイポリマータイヤ(ノーパンクタイヤ)は、クッションフロアやフローリングなど床面の材質との相性によっては車いすを走行させると汚れが付着したり、 床面を傷つける場合があります。十分注意してご利用ください。

● 主な装備



ワンプッシュ式ステップ (特許取得済)

従来は、ビスで固定していたため 高さ調整が手間でしたが、ワン プッシュ式ステップなら、ワン タッチで調整できます。



立体マクラ

頸部をささえ、頭を安定させます。



ワンタッチキャスタ (特許取得済)

キャスタに髪の毛やホコリが入る と転がりが悪くなります。ワンタッ チキャスタはフォークから簡単に 取り外せるため、掃除が容易です。



スライド延長ブレーキ

伸縮延長レバーを伸ばすと、軽い カでブレーキレバーを引くことが できます。



スライド格納式 アームサポート

使用者に合わせて、アームサポー トの高さを調整します。移乗時 はロックを解除し、座面の位置ま で下げられます。(5段階)



反射板付き樹脂ホイール

(特許取得済) 反射板が暗い夜道から車いすの 存在を知らせます。



カラードレバー

レバーの操作ミスを防ぐため、介 助者に「レバー」の色で注意を促 します。 ティルト/●オレンジ リクライニング/●グリーン



専用エアールクッション

使用者に合った空気圧を調整し、 おしりを沈み込ませることで、圧 力を分散し、安定した座位を保つ ことができます。



足踏み駐車ブレーキ

足で操作できるため、介助者の 腰の負担が少ないブレーキです。



転倒防止バー

車いすが後方に転倒するのを防 ぎます。

※掲載の価格は非課税価格です。 24.10




株式会社 ミキ

〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号

会社や商品についての情報のご確認は、MiKiホームページまで

http://www.kurumaisu-miki.co.jp/

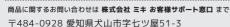

TEL 0570-00-3993 FAX 0568-66-6335

※愛知県への通話料が発生します。



お問い合わせ